
開口器

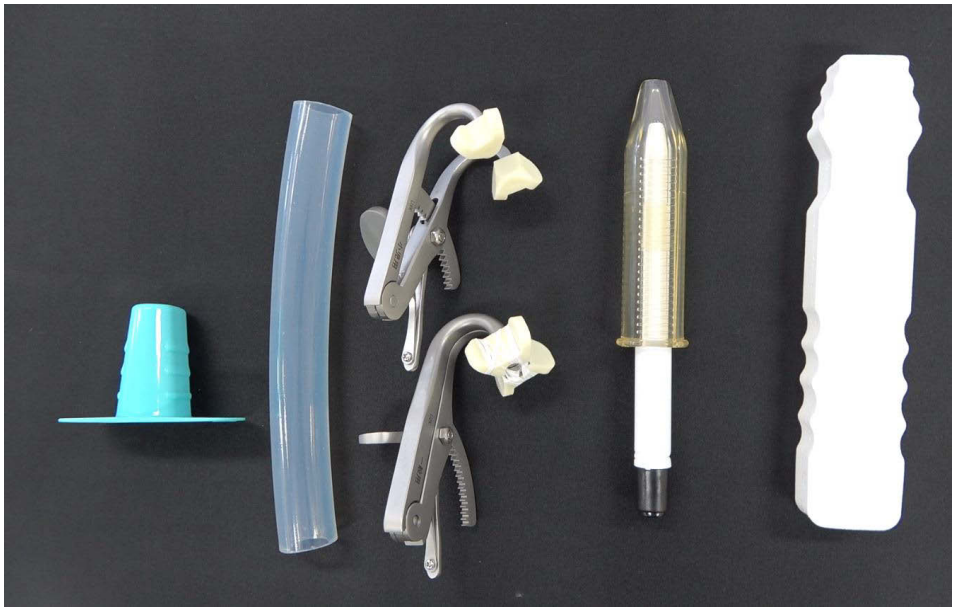

①デンタルブロック　親指に装着して咬んでもらう。指の誤咬をふせぐ

②バイトチューブ　シリコン製でやわらかく、オートクレーブ滅菌対応

③万能開口器　歯科治療で使われる。オートクレーブ滅菌対応

④照明開口器ホタル　照明で口内の汚れが確認できる。オートクレーブ滅菌対応

⑤開口補助具　オーラルバイト（R）　硬質ポリウレタン製で歯のない人にも使える

Ⅰ　デンタルブロック

1. 本体に使用開始日をご記入ください。
※6ヶ月を目安に交換してください。

2. 手袋をし、親指に
デンタルブロックを装着します。
※デンタルブロックにはLとSの2サイズがあります。
ご自分の指に合うサイズをご確認ください。



3. デンタルブロックを装着した親指を
口に入れて咬ませ、開口を維持します。



【対面で口腔ケアを行なう場合】
デンタルブロックを装着した親指を口角から入れて、しっかりと咬ませます。その他の指で顎を固定してください。



【背後から口腔ケアを行なう場合】
デンタルブロックを装着した側の腕と胸で、患者の頭部を抱えるように支えます。そして、背後からデンタルブロックを装着した親指を口角から入れて、しっかりと咬ませます。その他の指で顎を固定してください。


- １日３回使用する場合、６か月が交換目安
- 薬液、熱湯による消毒不可
- ひび割れの目視確認必要
- レントゲンに映りません



Ⅱ　バイトチューブ

「バイトチューブ」の動画
https://youtu.be/pzN-OubqmxE

Ⅲ　万能開口器

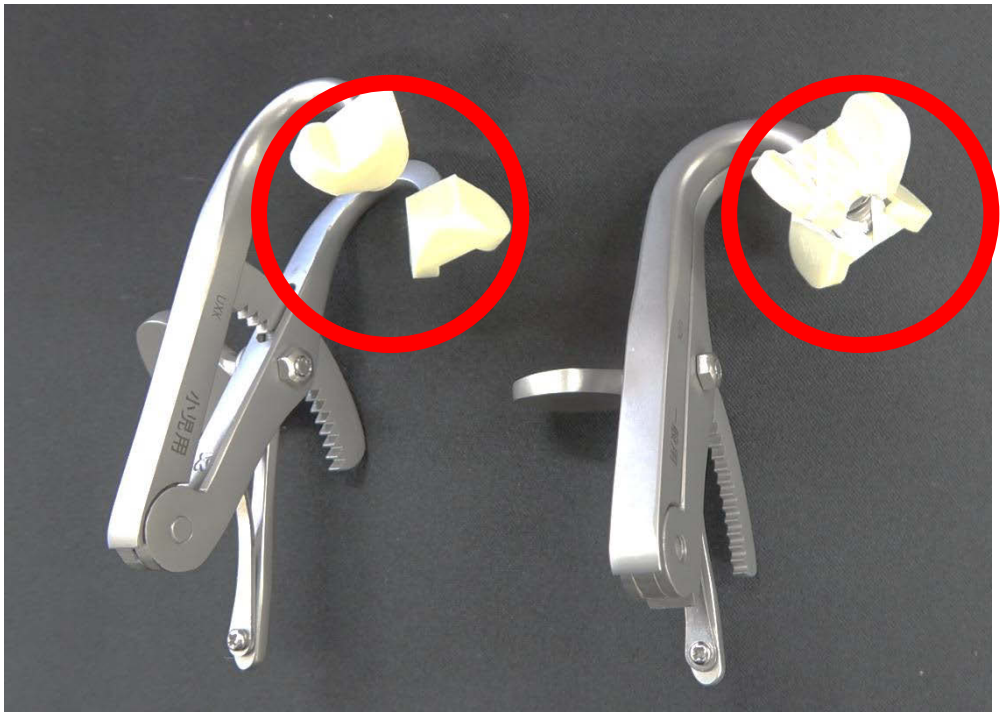

シリコンチップの脱落による窒息・誤嚥を防止するため、フロスなどで本体とチップを固定しておくと安心して使用できます



Ⅲ　万能開口器

「万能開口器」の動画
https://youtu.be/aLNq1OWjJ80



Ⅳ　照明開口器ホタル

「ホタル」の動画
https://youtu.be/qEp6ehEQs4c



Ⅴ　オーラルバイト

「オーラルバイト」の動画
https://youtu.be/HO_mtA_bxYw